

ZOLL AED 3™

Snelstartgids



ZOLL®

Welkom

Bedankt dat u gekozen hebt voor de automatische externe defibrillator ZOLL AED 3™. Dit is momenteel de meest geavanceerde AED ter wereld. Volg deze eenvoudige instructies om uw AED 3 in slechts een paar minuten te configureren. Zodra de configuratie is voltooid, noteert u het serienummer en logt u in bij www.zollaed3.com om uw AED 3 te registreren voor een uitgebreide garantie.

Neem bij eventuele vragen of problemen contact op met ZOLL via +1-978-421-9655, stuur een e-mail naar tservice_master@zoll.com of neem contact op met de geautoriseerde wederverkoper bij wie u uw AED 3 hebt gekocht.

Inhoud

Documentatiemap:

- Snelstartgids
- PlusTrac™-activeringscertificaat
- ZOLL AED 3-reddingsschema/poster
- ZOLL AED 3-bedieningshandleiding

In de doos:

- ZOLL AED 3
- Documentatiemap
- CPR Uni-padz™
- ZOLL AED 3-batterij


AED-registratie voltooien

Log in op www.zollaed3.com en profiteer van de volgende voordelen:


- Registratie voor de gratis uitgebreide garantie van 2 jaar
- Configuratie van uw PlusTrac-account met behulp van het PlusTrac-activeringscertificaat*, zodat u een jaar lang gratis gebruik kunt maken van PlusTrac
 - Volgen van de status van uw AED 3
 - Volgen van de opleiding van uw hulpverleners
 - Online beheer van uw AED-programma
 - Ontvangst van meldingen en herinneringen via e-mail
 - Ontvangst van resultaten van zelftests die vanuit uw AED 3 naar PlusTrac zijn verzonden via uw lokale WiFi-netwerk
- Ontvangst van informatie over de benodigde instellingen van uw online ZOLL-account voor het uploaden en beheren van klinische gebeurtenisgegevens in ZOLL Case Review™

*Het activeringscertificaat bevindt zich in de documentatiemap


Installatie van de ZOLL AED 3

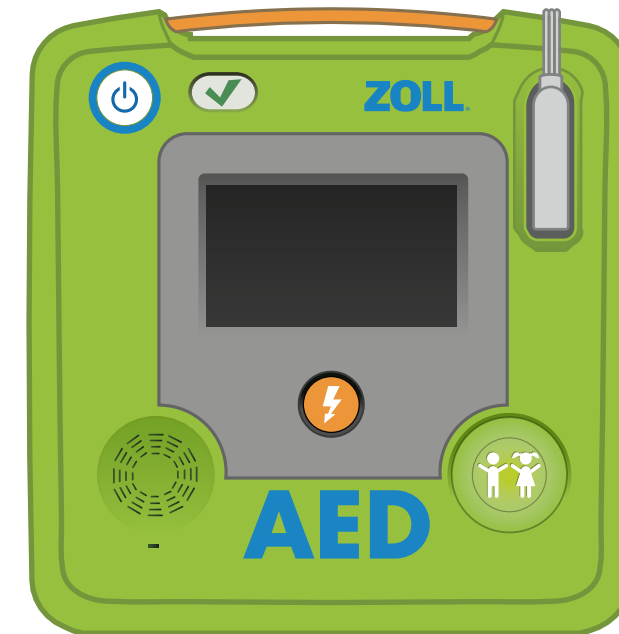


Open de verzendverpakking en verwijder de inhoud.

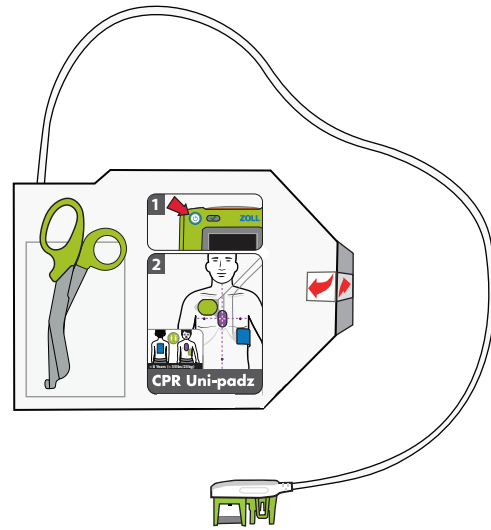


Haal de CPR Uni-padz uit de verpakking.

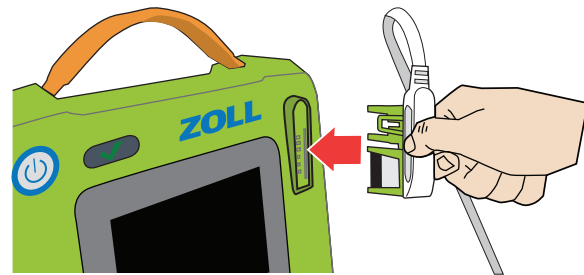


Steek de connector van de kabel voor de CPR Uni-padz in de elektrode aansluiting op de AED 3.

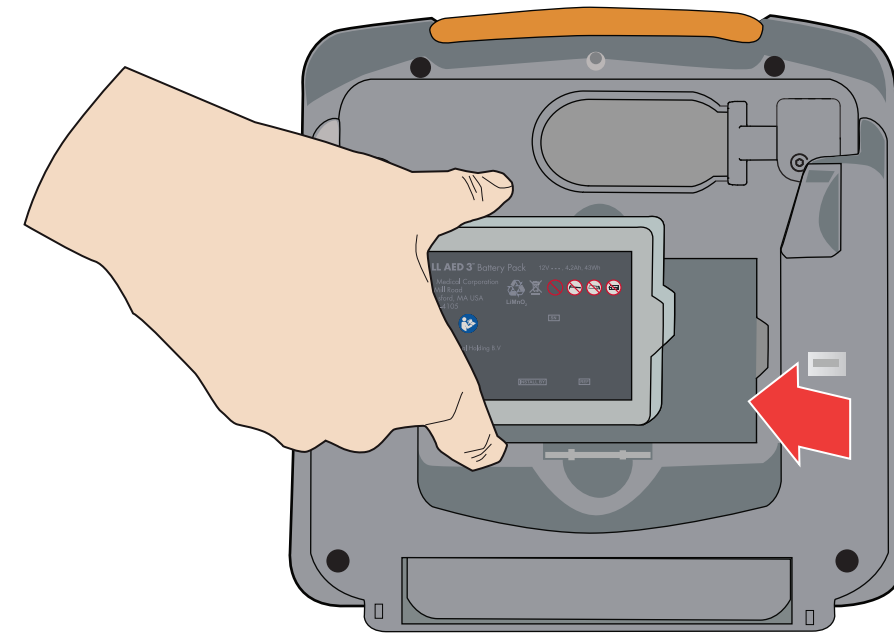

Haal de batterij voor de AED 3 uit de verpakking. Houd de batterij vast bij de lipjes aan de zijkant. Het label moet zich aan de buitenkant bevinden. Plaats de batterij in de achterkant van de AED; de batterij klikt hoorbaar vast. Zorg dat het uitsteeksel aan het uiteinde van de batterij in de corresponderende uitsparing van het batterijvak valt.

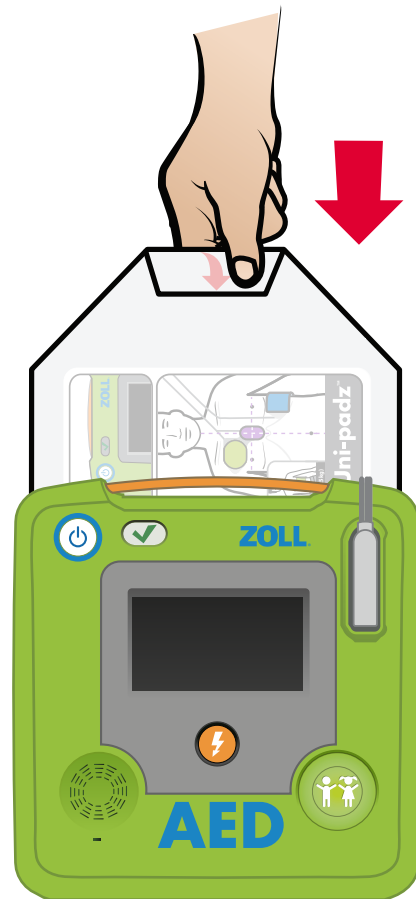

De ZOLL AED 3 voert een automatische zelftest uit. Sluit tijdens de zelftest de CPR Uni-padz aan op de achterkant van de AED. Het label op de verpakking moet hierbij naar u zijn gericht.

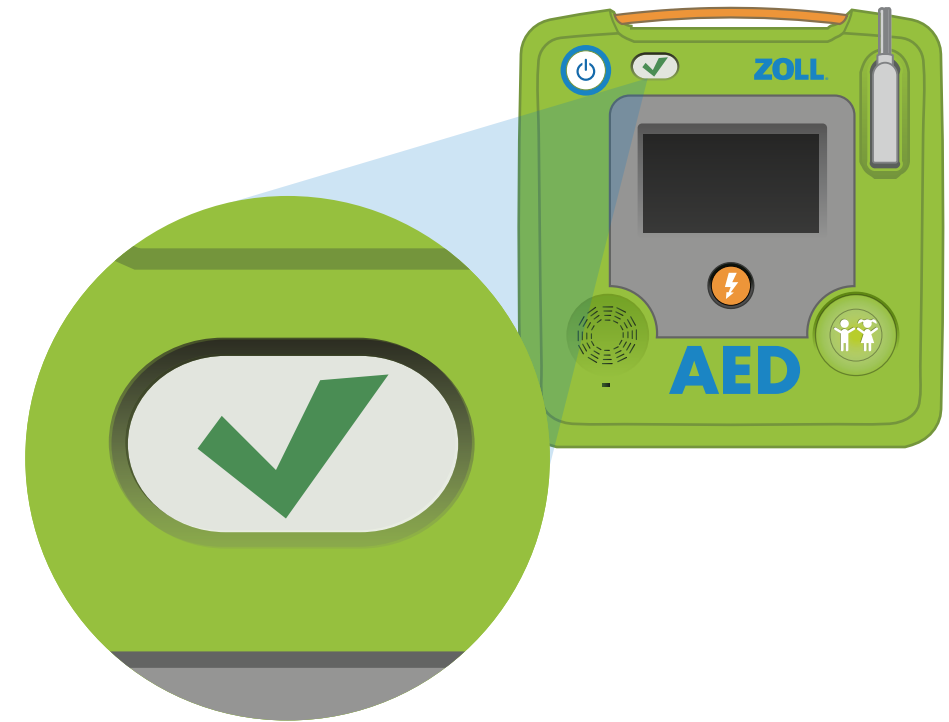

Nadat de zelftest van de AED 3 is voltooid, controleert u of de test is geslaagd door te luisteren of u het gesproken bericht "Apparaat OK" hoort of door te kijken of u het groene vinkje ziet in het statusindicatievenster. Uw AED 3 is nu gereed voor gebruik. Als u nog vragen hebt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing in de documentatiemap.

Vragen:

Neem contact op met de technische dienst van ZOLL of met een geautoriseerde ZOLL-vertegenwoordiger in uw regio.

Technische dienst van ZOLL:

Telefoon: +1-978-421-9655

E-mail: tservice_master@zoll.com

9650-000753-16 Rev. A

ZOLL®